



## Automatiser l'import de CD et DVD dans le PACS

### Intégrer automatiquement les examens extérieurs dans le PACS

CD-in a été spécialement conçu pour être utilisé automatiquement sur les postes d'accueil des patients.

CD-in permet le rapprochement des identifiants des images du CD/DVD avec les données de l'établissement avant leur intégration dans le réseau d'imagerie interne (conforme au profil IHE Portable Data for Imaging / Portable Media Importer).

Le traitement est optimisé pour rendre le média au patient avec un temps d'attente minimum.

L'interface de configuration permet de gérer l'envoi des images avec ou sans rapprochement, d'accepter des médias avec ou sans DICOMDIR ou encore d'accepter des médias multi-examens ou multi-patients.

Une grande souplesse de configuration permet de définir les règles de rapprochement des identifiants et les modifications à apporter aux images (choix des champs à modifier, ajout de préfixes, remplacements...).

### Configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 2000, XP, Vista, 7


Processeur : Pentium IV 2 GHz, 1 Go de mémoire

Disque dur : 1 Go d'espace libre


Lecteur de CD/DVD




Média valide détecté.

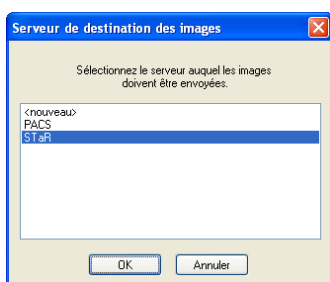

Choix de la destination, selon la configuration de CD-in.

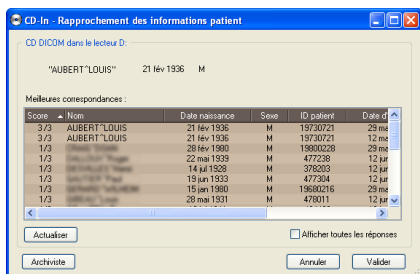

Rapprochement des identifiants, selon la configuration de CD-in.

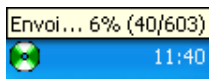

Envoi automatique en tâche de fond.

### Fonctionnalités

Simplissime et automatique. Après configuration,

CD-in fonctionne automatiquement et avec un minimum d'intervention utilisateur.

#### Grande souplesse de configuration

Accepte des médias avec ou sans fichier d'index DICOM (DICOMDIR).

Affichage du contenu détaillé du média.

Choix des destinations d'envoi avec filtrage sur les types d'objets DICOM.

Possibilité de confirmation avant rapprochement.

Définition des champs utilisés pour le rapprochement.

Choix des champs mis à jour à partir des informations de la liste de travail.

Activation des journaux de traces.

Traitement en parallèle de la copie des images sur le disque local et de l'envoi sur le serveur pour optimiser le temps de traitement.

Reprise des images copiées en local en cas d'échec de l'envoi.

Limitation de la taille des données en local.

#### Plusieurs médias supportés

CD, DVD, clé USB.

Gestion des médias multi-examens et multi-patients.

### Produit compagnon

Lorsque le rapprochement ne peut se faire automatiquement, CD-in peut envoyer vers une autre destination que le serveur PACS pour un rapprochement manuel.

**ETIAM Viewer** édition Advanced permet de visualiser les examens en détail, de réaliser une sélection fine des images, ainsi que d'effectuer un rapprochement manuel en modifiant les informations sur l'examen et le patient avant d'envoyer l'examen vers le serveur d'images.

Le rapprochement peut être fait via trois modes complémentaires :

- En renseignant les identifiants manuellement
- En interrogeant la liste de travail (Worklist) comme CD-in
- En interrogeant le PACS sur les examens antérieurs du patient

### Plus-values

Très peu d'interaction avec l'utilisateur en tâche de fond.

Copie et envoi des images en simultané pour accélérer le transfert.

Automatisation des traitements (lecture, copie, rapprochement, envoi).

Grande souplesse de configuration pour définir les règles de rapprochement et les identifiants à modifier.

Gestion des erreurs et des reprises d'envoi.



#### ETIAM S.A.S.U.

Technopole Atalante  
2, rue Pierre Joseph-Colin  
35000 Rennes  
France  
Tél. : +33 2 99 14 33 88  
Fax : +33 2 99 14 33 80  
E-mail : sales-fr@etiam.com

#### ETIAM Corp.

185 Alewife Brook Parkway  
Suite 410  
Cambridge, MA 02138  
USA  
Toll Free: (877) 384-2662  
Tel./Fax: (617) 395-5809  
E-mail: sales-us@etiam.com

#### ETIAM GmbH

Lebacher Straße 4  
66113 Saabücken  
Deutschland  
Tel.: +49 (0)681 99 63 308  
Fax: +49 (0)681 99 63 111  
E-mail: sales-de@etiam.com

[www.etiam.com](http://www.etiam.com)

Pour en savoir plus...

[www.etiam.com](http://www.etiam.com)

Ce document est non contractuel et ETIAM se réserve le droit de modifier tout ou partie de cette offre sans préavis. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ix-xiii