

## Cloud-basierende Verbindung für den **elektronischen Austausch medizinischer Bilddaten**



**Auswählen,  
Hochladen,  
Teilen,  
Mitarbeiten**

**ETIAM-Connect ist eine sichere Lösung für den Austausch medizinischer Bilder und klinischer Daten per Internet.**

ETIAM-Connect wird bereits in über 120 Krankenhäusern erfolgreich eingesetzt. Etwa 100 Millionen Bilder wurden bereits über ETIAM-Connect ausgetauscht.

ETIAM-Connect rationalisiert die Weitergabe medizinischer Bilder in der Notaufnahme, bei der Verlegung von Patienten und Zusammenarbeit mit dem überweisenden Arzt, in der Teleradiologie sowie in den Bereichen Schlaganfall und Onkologie.

Der Austausch medizinischer Aufnahmen per CD oder Röntgenfilm erübrigt sich mit ETIAM-Connect, denn sämtliche Studien werden über eine sichere

Cloud-basierende Verbindung ausgetauscht. ETIAM-Connect ermöglicht den Austausch ganzer Patientenakten einschließlich Bildmaterial.

Das System eignet sich nicht nur zur simplen Übertragung medizinischer und klinischer Daten, sondern dient den behandelnden Ärzten auch als Kommunikationsplattform für den fachlichen Austausch.

ETIAM-Connect lässt sich für unterschiedliche Zwecke (wie z. B. Stroke-Behandlungsplan oder Konsultation eines Fachkollegen, Radiologen oder Neurochirurgen) anpassen.

Es fügt sich nahtlos in die bestehenden Abläufe und die gängige bilddiagnostische Technik (Modalitäten, PACS, Nachbehandlung ...) ein und lässt sich über Standardbrowser bedienen.


ETIAM-Connect erfüllt sämtliche Datenschutzanforderungen, da es den Datenaustausch über eine sichere Internetverbindung vornimmt und nur den jeweils berechtigten Anwendern Zugriff auf die Daten gewährt.



Kein Austausch von CDs mehr nötig



ETIAM-Connect baut über die Cloud eine sichere Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf. Die Patientendaten werden nicht in der Cloud gespeichert, sondern lediglich zwischen den Providern übertragen.

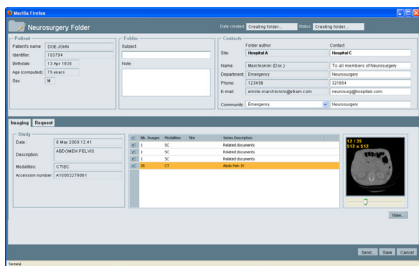

ETIAM-Connect ist eine Plattform für den Austausch von Patientendaten (DICOM-Bildern, Formularen, Dokumenten, Berichten, Stand- und Bewegtbildern).

**ETIAM GmbH**  
Lebacher Straße 4  
66113 Saarbrücken  
Deutschland

Tel.: +49 (0)681 99 63 308  
Fax: +49 (0)681 99 63 111  
sales-de@etiam.com

**ETIAM S.A.S.**  
Technopole Atalante  
2, rue Pierre-Joseph Colin  
35000 Rennes  
France

Tel.: +33 (0)2 99 14 33 88  
Fax: +33 (0)2 99 14 33 80  
sales-fr@etiam.com

## Sicherheit und Vertraulichkeit

- Lückenlose Erfassung sämtlicher Aktivitäten
- HIPAA-konform
- Kein Öffnen ausgehender Ports erforderlich
- 128-Bit-SSL-Verschlüsselung sämtlicher Datentransfers


## Standardkonform

- Einbindung von DICOM-Diensten: Storage SCP/SCU, Query/Retrieve SCP und SCU, Storage Commitment SCP, Verification SCP und SCU.
- Unterstützung aller DICOM-Objekte: Standbilder (CT, MR ...) oder Multiframe (US, XA, MPEG ...) mit oder ohne Komprimierung sowie Nichtbilder (SR, KO, PDF, PR, RT ...).
- ETIAM-Connect hält die IHE-ATNA-Empfehlungen zu Nachverfolgbarkeit und IHE XDS/XDS-I-Metadaten ein und gewährleistet so die Interoperabilität mit regionalen Telegesundheitsplattformen.

## Pluspunkte

- Kein Austausch von CDs mehr erforderlich** – kein Archivierungs- und Versandaufwand mehr
- Wirtschaftlich** – kein Personalaufwand mehr für das Kopieren von Bildern
- Gesteigerte Auslastung** – mehr Überweisungen dank effizientem Service für niedergelassene Ärzte
- Internetnutzung** – bessere Auslastung und mehr Überweisungen ohne zusätzliche Personalkosten
- Bessere Versorgung von Traumapatienten** – effiziente Behandlungsplanung, da die Daten vor dem Patienten im Haus sind. Kein Hin und Her von CDs mehr, keine Abhängigkeit von der Betriebsbereitschaft von Bildgebungssystemen mehr
- Fachliche Zusammenarbeit** – ETIAM-Connect dient nicht nur zur Übertragung medizinischer Aufnahmen, sondern ermöglicht auch einen fachlichen Austausch der behandelnden Ärzte zu den bereitgestellten Bildern, Berichten, Videos und Daten.

## So funktioniert es

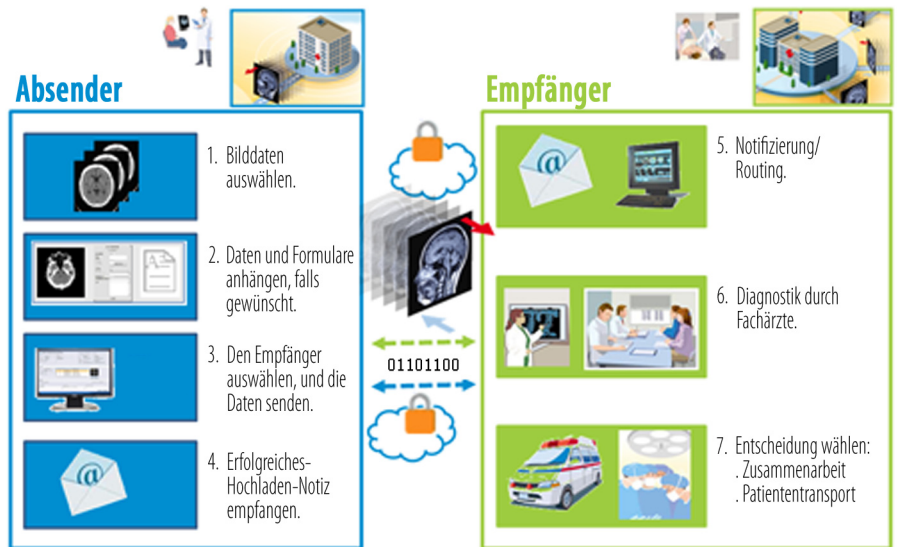

Erfahren Sie mehr unter...

[www.etiam.com](http://www.etiam.com)

Dieses Dokument ist nicht vertragsbindend und kann im Falle eines Angebots ohne weitere Ankündigung geändert werden. Alle Marken sind registrierte Marken und somit Eigentum der jeweiligen Besitzer.