



## Impression de livrets patient

### Publiez vos examens à un coût papier pour une qualité optimale

Le logiciel ETIAM PRI \* transforme votre imprimante en système d'impression DICOM (le standard international de l'imagerie médicale).

Il agit comme une passerelle entre la station de travail et l'imprimante.

ETIAM PRI permet d'imprimer à faible coût tous les types d'examens : couleur, noir et blanc, formats A4 et A3.

Son utilisation ne change pas les habitudes de travail. Vous composez vos sélections d'images depuis votre console, puis les envoyez à l'imprimante via la passerelle ETIAM PRI.

Vous pouvez connecter plusieurs équipements ou consoles, quel qu'en soit le type (scanner, IRM, radio conventionnelle, etc.).

Le logiciel permet de définir des configurations différentes en fonction des types d'examens ou des besoins des utilisateurs (édition Advanced).

Il offre une palette de choix de configurations d'impression : paramètres de rendu, choix du logo, personnalisation des textes en marge des images, etc.

Installé sur un PC équipé des pilotes de l'imprimante, il est connecté à votre réseau informatique.

ETIAM PRI est disponible en édition **Advanced** (voir détails au verso).

\* PRI : Patient Report Images



## Configuration requise

Processeur : 2 GHz ou plus

Mémoire : 1 Go (2 Go recommandés)

Système d'exploitation : Windows XP, Vista, 7

Espace disque disponible : Logiciel : 15 Mo ;  
données : selon l'usage (1 Go recommandé)


Connexion TCP/IP



Fenêtre de configuration (Basic).



Fenêtre de configuration (Advanced).

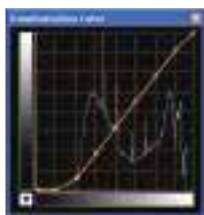

Courbe de transformation avec points de contrôle ajustables et histogramme d'une image.

## Principales fonctions

### Édition Advanced

Inclut toutes les fonctions de l'édition Basic et les complète par les fonctions suivantes :

Gestion de profils colorimétriques (ICC) pour ajuster les rendus d'impression.

Réglage fin des transformations par courbe ajustable multipoints en lien avec l'histogramme des images.

Rehaussement automatisé des annotations (mesures, commentaires).

Mode « Store to print » : Réception des images en DICOM Store, puis mise en page et impression automatiques.

Mode livret avec personnalisation de la 1<sup>er</sup> et 4<sup>e</sup> pages de couverture et intégration du compte rendu.

Utilisation des attributs DICOM des images reçues pour personnalisation du livret (nom du patient, date et type d'examen...).

Gestion d'un nombre illimité de profils de configuration permettant de définir des combinaisons des réglages précédemment cités.

Les configurations sont enregistrées et directement accessibles depuis la station de travail (déclaration d'une entité DICOM par profil).

Journal de production pour comptage des impressions par profil.

Export et impression de relevés de statistiques.

## Produits compagnons

**Gravure CD/DVD** – Avec ETIAM MARS produisez automatiquement des CD/DVD pour l'imagerie médicale.

**Diffusion Web** – Avec ETIAM Image Distribution, partagez avec des professionnels de santé et des patients des examens d'imagerie via un réseau Internet sécurisé.

### Interopérabilité

Compatible avec toutes les modalités et sources d'imagerie DICOM.

Compatible avec tous les modèles d'imprimantes.

### Plus-values

Solution économique par rapport au film.

Choix étendu de mises en page et de présentations.

Possibilité de fusionner plusieurs examens dans un même livret.

Intégration de comptes rendus automatique ou manuelle.

Fonctionnement en mode serveur (connexion de plusieurs modalités et imprimantes).

### ETIAM Group

ZA de la Hallerais  
11 rue du Bois de Soeuvres  
35770 Vern-sur-Seiche  
France

Tél. : +33 2 99 14 33 88

Fax : +33 2 99 14 33 80

E-mail : sales-fr@etiam.com

### ETIAM Corp

100 Main Street  
Suite 10  
Maynard, MA 01754  
USA

Toll Free: (877) 384-2662

Tel./Fax: (617) 395-5809

E-mail: sales-us@etiam.com

### ETIAM Asia

Bld 6, No. 1279,  
Zhongshan West Road  
200051 Shanghai Office 251  
China

Tel.: (+86)021-51168268

(+86) 1561-830-8300

E-mail: sales-cn@etiam.com

[www.etiam.fr](http://www.etiam.fr)

Pour en savoir plus...

[www.etiam.fr](http://www.etiam.fr)

Ce document est non contractuel et ETIAM se réserve le droit de modifier tout ou partie de cette offre sans préavis.  
Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

x-xiv